



# Benutzerhandbuch

Massagesessel MA2501

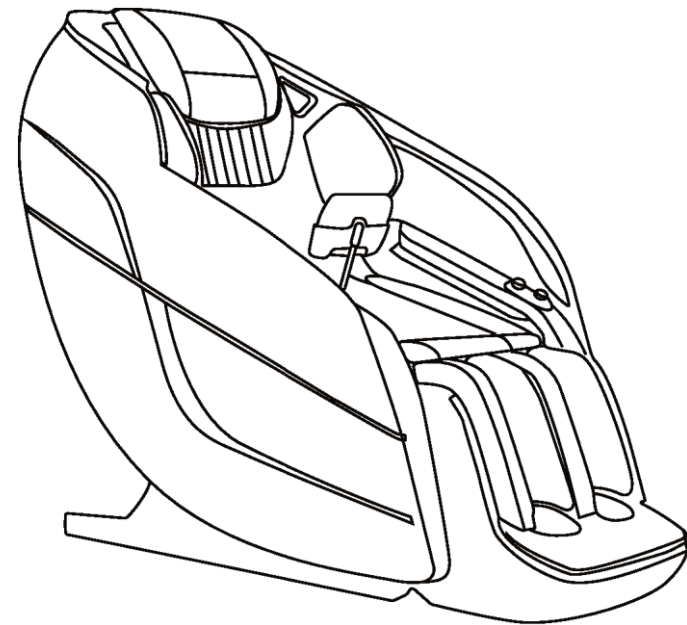


**(-) Packen Sie den Sessel aus und nehmen Sie das Zubehör heraus.**

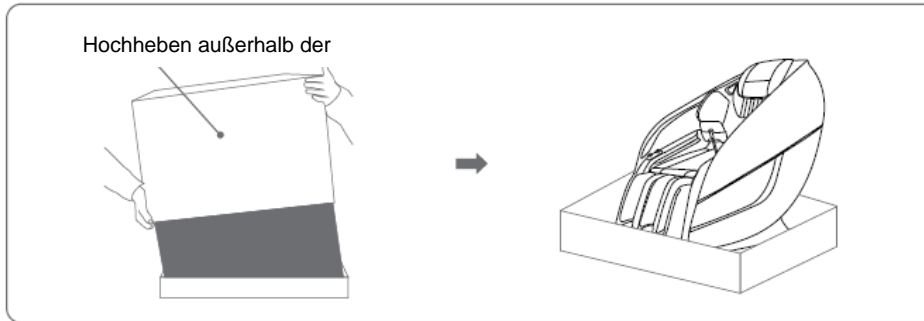

1. Entfernen Sie das Verpackungsband des äußeren Kartons, heben Sie den äußeren Karton an und nehmen Sie ihn heraus.
2. Entfernen Sie das Zubehör und legen Sie es beiseite.

**(=) Platzieren des Massagesessel**

- \* Heben Sie den Massagesessel vorsichtig aus dem Basiskarton und platzieren Sie ihn an der gewünschten Stelle.
- \* Stellen Sie ihn nicht an einen Ort mit direktem Lichteinfall, Heizgeräten usw. auf, anderenfalls wird es zu Verfärbungen oder Verhärtungen des Leders führen.
- \* Um Schäden am Boden zu vermeiden und Geräusche zu reduzieren, polstern Sie den Massagesessel bitte mit Tüchern oder anderen Dingen ab.
- \* Achten Sie darauf, dass sich vor und hinter dem Stuhl keine Hindernisse befinden (hinter der Stuhllehne sollte mehr als 25 cm Platz sein).
- \* Stellen Sie den Sessel nicht an feuchten Orten oder auf unebenen Flächen auf.
- \* Um Signalstörungen zu vermeiden, halten Sie bitte mindestens 1 Meter Abstand zu TV, Radio und anderen Geräten.

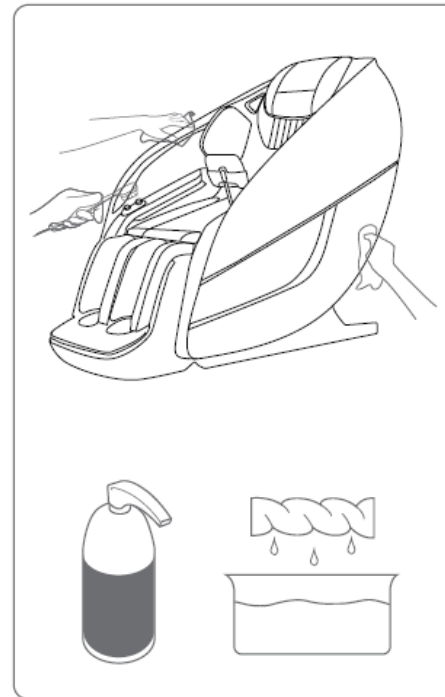

**Reinigung:**



Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme, aggressive Reinigungsmittel (z. B. Benzol oder Verdüner) oder scharfe Chemikalien wie Petroleum oder Aceton zur Reinigung des Sessel.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Sessel reinigen.
2. Verwenden Sie zum Reinigen ein trockenes Tuch.
3. Verwenden Sie keine nassen Tücher und chemischen Reinigungsmittel.

**Lagerung:**


1. Trennen Sie den Massagesessel von der Stromquelle nach dem Gebrauch.
2. Setzen Sie den Massagesessel nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Dies könnte zum Ausbleichen oder zu anderen Schäden an den Polstermöbeln führen.
3. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Massagesessel.

Wenn der äußere Bezug oder der Mechanismus beschädigt ist, benutzen Sie den Sessel nicht mehr und wenden Sie sich an uns, um Hilfe zu erhalten.

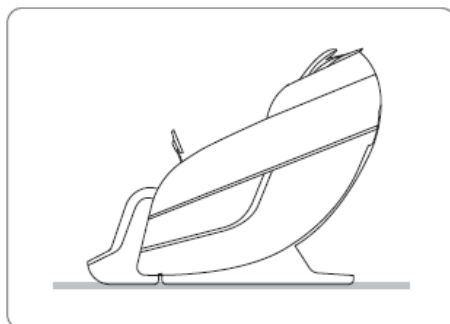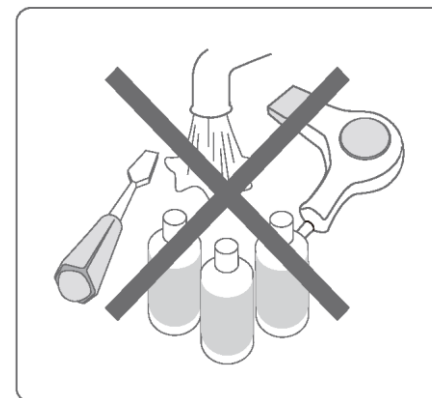

Situation/Fehler	Lösung
Laute Motorgeräusche (vor allem während der Massageprogramme Klopfen und Kneten).	Dies sind normale mechanische Geräusche, die während der Massageprogramme auftreten. Es handelt sich hierbei nicht um eine Fehlfunktion.
Eingesteckt, aber der Massagesessel lässt sich nicht bedienen.	Überprüfen Sie, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie, ob der Einschalter des Massagesessels in der Position „1“ ist.
Der Controller ist betriebsbereit, aber der Massagesessel funktioniert nicht.	Der Sessel ist evtl. überhitzt. Nehmen Sie den Sessel von der Stromzufuhr und lassen Sie ihn 30-50 Minuten abkühlen.
Beim Verwenden von Programmen, der Controller nicht im Betrieb ist und der Sessel stoppt	Automatische Timing-Funktion nach dem Start. Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, kontrollieren Sie bitte den Schalter.

Sollten andere Probleme bei Ihrem Massagesessel auftreten, stoppen Sie bitte den Betrieb, nehmen Sie ihn vom Netz und wenden Sie sich an Ihren Händler.

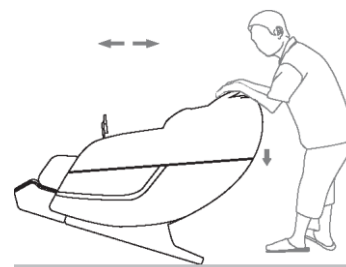

**1)** Drücken Sie, wie abgebildet, die Rückenlehne nach unten und kippen Sie den Stuhl in einem Winkel von 45° auf die Räder.




**2)** Schieben Sie den Stuhl langsam in die gewünschte Position.

**3)** Senken Sie den Stuhl langsam und gleichmäßig ab, bis er ganz flach auf dem Boden steht.

#### Achtung!

- \* Bevor Sie den Stuhl bewegen, stellen Sie die Fußstütze wieder in ihre ursprüngliche Position.
- \* Bewegen Sie den Stuhl nicht, wenn er besetzt oder in Gebrauch ist, denn dadurch kann der Boden beschädigt werden.
- \* Es wird empfohlen, den Boden zu schützen (z. B. durch Teppiche).
- \* Lassen Sie den Stuhl beim Bewegen nicht fallen oder plötzlich los, da dies den Stuhl beschädigen kann.
- \* Es wird empfohlen, den Stuhl mit zwei Personen zu transportieren und es ist besondere Vorsicht geboten.



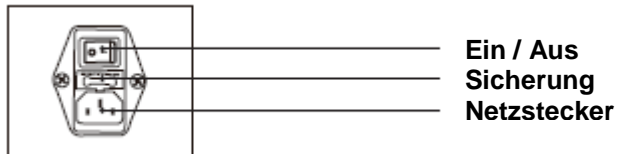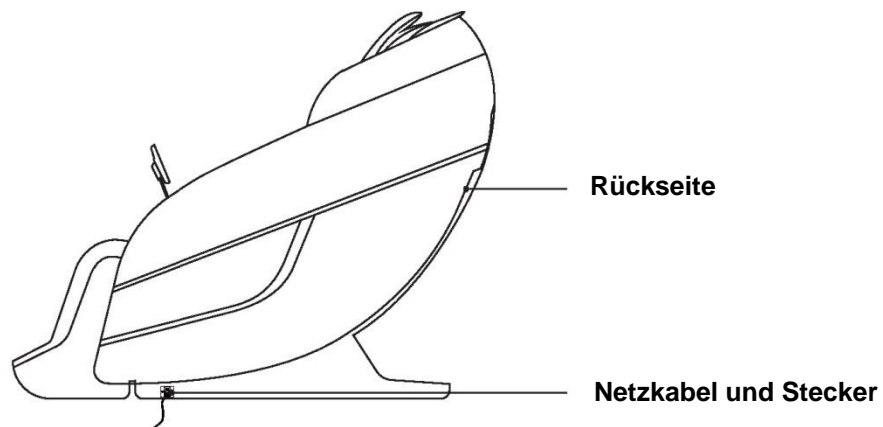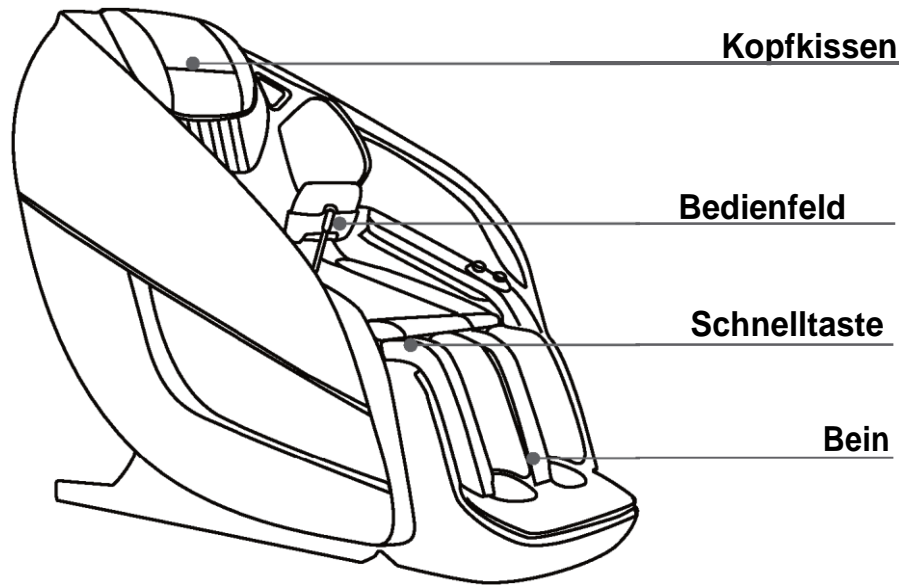

- Beaufsichtigen Sie Kinder oder behinderte Personen bei der Benutzung des Sessels.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein neues Kabel oder ein spezielles Bauteil ersetzt werden, das beim Hersteller oder beim Kundendienst erworben wird.
- Die Oberfläche des Sessels ist heiß. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Spannungen, die nicht der Norm des Geräts entsprechen.
- Dieses Produkt benötigt eine Steckdose mit Erdung.
- Beschädigte Leder- oder Stoffbezüge sollten rechtzeitig ersetzt werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Bedienfeld nicht mit Wasser, um einen Ausfall der Steuerung zu vermeiden.

### Bitte lesen Sie vor der Benutzung alle Anweisungen!



Der Massagesessel muss mit einer zum Stecker passenden Steckdose ausgestattet sein. Eine unsachgemäße Erdung kann einen elektrischen Schlag verursachen. Bitte verändern Sie den Stecker nicht ohne Genehmigung. Bitte verändern Sie den Stecker nicht eigenmächtig, sondern beauftragen Sie professionelles und technisches Personal mit der Überprüfung. Bei der Verwendung elektrischer Produkte sind die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um elektrische Schläge, Verbrennungen, Brände oder Verletzungen zu vermeiden:

- Achten Sie darauf, dass Sie eine zum Stecker passende Steckdose verwenden.
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, um die Gefahr eines Kurzschlusses oder eines Brandes zu vermeiden.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen.
- Lagern und verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder in direktem Sonnenlicht.
- Sollte es während des Gebrauchs zu einem plötzlichen Stromausfall kommen, stellen Sie bitte sofort den Schalter auf „O“ und ziehen Sie den Stecker heraus, um Schäden am Gerät zu vermeiden, wenn der Strom ausfällt.
- Betreiben Sie den Massagesessel nicht, wenn das Kabel nass oder beschädigt ist.
- Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein und aus, um Unfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nur für den in dieser Anleitung angegebenen Zweck verwendet werden.
- Stehen, sitzen oder springen Sie nicht auf dem Wadenständer, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, sich auf die Armllehne oder die Rückenlehne zu setzen, damit der Massagesessel nicht umkippt, was zu Unfällen führen kann.
- Bitte halten Sie den Massagesessel immer sauber und vermeiden Sie es, andere Gegenstände in den Zwischenraum des Massagesessels einzuführen.
- Bewegen Sie den Massagesessel nicht durch direktes Ziehen am Netzkabel.
- Bitte prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Flanell auf der Rückseite des Massagesessels Risse aufweist. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie ihn nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst des Herstellers.
- Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.
- Konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie einen Massagesessel benutzen können.
- Um Beschwerden oder Verletzungen durch die Verwendung dieses Massagesessels zu vermeiden, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden: Patienten mit bösartigen Tumoren, mit Herzerkrankungen, Schwangere Frauen, Gebärende Frauen oder menstruierende Frauen, diejenigen, die Ruhe benötigen, die in Behandlung sind, mit Rückenerkrankungen, Halswirbelanomalien oder -verformungen.
- Wenn Sie während der Anwendung Schmerzen verspüren, beenden Sie die Anwendung bitte sofort. Wenn Sie sich während der Anwendung verletzen, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
- Massieren Sie keine rote oder entzündete Haut.
- Dieses Produkt ist nur für die Familie und bietet einen komfortablen Massage Genuss. Es ersetzt keine professionelle Massage, medizinische Geräte oder professionelle Behandlung.
- Es wird empfohlen, den Massagesessel für 30 Minuten jeden Tag zu benutzen. Die Massage des gleichen Körperteils sollte nicht mehr als 15 Minuten dauern. Übermäßige Massage führt zu einem kontraproduktiven Effekt. Die lange Betriebszeit wird zur Überhitzung des Massagesessels führen und die Lebensdauer des Produkts verkürzen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, in der Gas eingeleitet oder Sauerstoff zugeführt wird.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

## 1. Bedienfeld



**1 Automatik-Programm-Taste:** Drücken, um das automatische Programm zu wechseln, die Reihenfolge ist wie folgt: Ganzkörper-Entspannungsmassage, Herausragende Dual-Bewegungen, traditionelle Massage, Büroangestellte, Ruhemodus, Nacken- und Schultermassage, Taille- und Hüft-Massage.

**Ganzkörper-Entspannungsmassage:** Massagebewegungen am ganzen Körper, Kneten, Klopfen, hauptsächlich Rollen, mit 3D-herausragender Funktion, mit dem Zweck den ganzen Körper zu entspannen.

**Herausragende Dual-Bewegungen:** Die Massagewirkung erstreckt sich über den ganzen Körper, hauptsächlich Klopfen mit variabler Geschwindigkeit, Kneten & Klopfen, die obere und untere Bewegungswirkung ist offensichtlich.

**Traditionelle Massage:** Massagebewegungen am ganzen Körper, überwiegend vor allem 3D-herausragend mit einer sanften Knetmassage, um einen tiefen Massage-Effekt zu erreichen.

**Büroangestellte:** Nacken & Schultern, hauptsächlich Taillen-Massage.

**Telefon/Smartphone:** Knet- und Rollmassage an Nacken und Schulter.

**Ruhemodus:** sanfte Massage.

**Nacken- und Schultermassage:** Konzentriert sich auf die Nacken- und Schultermassage und wendet alle Massagetechniken an.


**Taillen- und Hüftmassage:** Hauptsächlich Taillen- und Hüftmassage.

**2 Nacken- und Schultertaste:** Nach dem Start des Massagesessels können Sie mit der Taste schnell den Nacken- und Schulter-Entspannungsmodus öffnen.

**3 Ein/Aus-Taste:** Drücken Sie, um die Massage ein-/auszuschalten.

**4 Taille-Hüfte-Taste:** Nach dem Start des Massagesessels können Sie mit der Taste schnell den Modus für die Taille- und Hüftmassage öffnen.

**5 Schwerelosigkeitstaste:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der Schwerelosigkeitsfunktion anklicken.

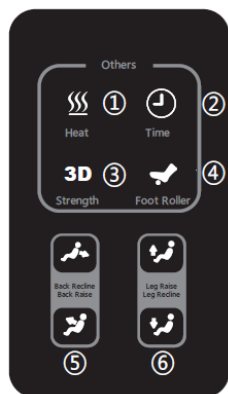

**Funktionseinstellung:**

- 1 Heizung:** Ein- und Ausschalten der Heizfunktion, die Heizposition befindet sich auf der Rückseite.
- 2 Timer:** Drücken Sie die Taste, um die Massagezeit zu erhöhen. Wenn 30 Minuten erreicht sind, drücken Sie diese Taste erneut und die Zeit wird auf 5 Minuten zurückgesetzt.
- 3 3D-Stärke:** Schaltet die 3D-Massage ein/aus. Sie ist wirksam, wenn die manuelle Massage geöffnet ist.
- 4 Fußrollen:** Drücken Sie die Taste, um die Fußrollenfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- 5 Einstellen der Rückenlehne:** Lange Drücken, um die Rückenlehne zu verstellen.
- 6 Beinverstellung:** Lange drücken, um die Beine anzuheben und zu neigen.

**Manuelle Einstellung:**


- 1 Auf-/Abwärts:** Stellen Sie die obere und untere Positionen der Bewegung des Sessel ein. Drücken Sie die „Oben-Taste“ lange, bewegt sich der Sessel nach oben. Drücken sie die „Runter-Taste“ lang, bewegt sich der Sessel nach unten.
- 2 Airbag Taste:** Wählen Sie die Taste Airbag-Massage-Bereich, die spezifische Schaltfolge ist wie folgt: Bein-, Arm-, Schulter-Airbag, Bein & Arm-Airbag, alle Airbag, Airbag schließen.
- 3 Airbag Stärke:** Drücken Sie die Taste, um die Stärke des Airbags einzustellen, insgesamt 5 Stufen.
- 4 Festpunktaste:** Wählen Sie den Massagebereich je nach Bedarf. Es ist wirksam, wenn manuelle Massage geöffnet ist. Klicken Sie auf die Spot-Taste, um verschiedene Massage Bereich zu wählen, die Schaltfolge ist wie folgt: Spot-Massage, Teilbereich Massage, den ganzen Körper Massage.
- 5 Bewegungsgeschwindigkeit:** Drücken, um die Bewegungsgeschwindigkeit einzustellen, insgesamt 5 Stufen.
- 6 Manuelle Massage:** Drücken Sie, um verschiedene Massagetechniken zu wählen, die Schaltfolge ist wie folgt: Kneten 1, Kneten 2, Kneten 3, Klopfen, Kneten & Klopfen, Shiatsu und Rollen.
- 7 Bewegungsbreite:** Drücken Sie, um die Bewegungsbreite einzustellen, breit, mittel und schmal - drei Arten von Breite.



Der Projektname	Spezifikationen
Name des Produkts	Massagesessel
Type Nummer	MA-2501
Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50/60Hz
Nennleistung	200W
Größe des Produkts	(L)1411 x (B)907 x (H)1282 mm

## Bluetooth-Musikverbindung

- Schritt 1:** Schalten Sie den Netzschalter des Massagesessels ein.
- Schritt 2:** Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ein und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.
- Schritt 3:** Nachdem die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie unter „Bluetooth-Geräte“ „MESSAGE CHAIR XXX „ (X steht für die Seriennummer) aus, um eine Verbindung herzustellen.
- Schritt 4:** Öffnen Sie die Musik-Player-Software des Mobiltelefons, um Musik abzuspielen.

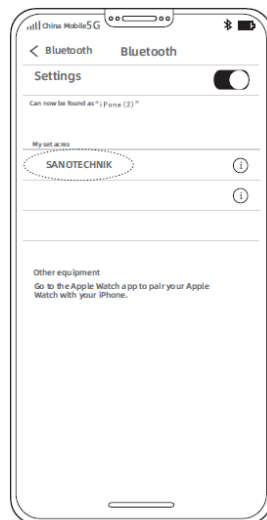

### Tipp

Verschiedene Systeme von Mobiltelefonen. Die Verbindung mit dem Bluetooth sind unterschiedlich, bitte nach der Vorgabe des Handy Typ Verbinden.

## 2. Beschreibung der Knöpfe



### Knopf 1

1. Im eingeschalteten Zustand lange drücken, um den Massagesessel zu öffnen/ schließen.
2. Im eingeschalteten Zustand, wenn das manuelle Programm geöffnet ist, drehen Sie diesen Knopf, um den Hebewinkel der Rückenlehne einzustellen.
3. Im eingeschalteten Zustand, klicken Sie auf die mittlere Schaltfläche, um die Kneifunktion unter Bewegung zu öffnen. Wenn sich die Bewegung im festen Zustand befindet, wählen Sie diese Schaltfläche aus, um die oberen und unteren Positionen der Bewegung fein abzustimmen. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um den Festpunktmodus abzubrechen und die Kneifunktion auszuschalten.




### Knopf 2

1. Im eingeschalteten Zustand, wenn das manuelle Programm nicht geöffnet ist, drehen Sie diesen Knopf: im Uhrzeigersinn wechseln Sie zum Automatikprogramm 2, gegen den Uhrzeigersinn wechseln Sie zum Automatikprogramm 1.
2. Im eingeschalteten Zustand, klicken Sie auf die mittlere Schaltfläche, um die Kneifunktion der Bewegung zu öffnen. Wenn sich die Bewegung im festen Zustand befindet, wählen Sie diese Schaltfläche aus, um die oberen und unteren Positionen der Bewegung fein abzustimmen. Klicken Sie erneut auf diese Schaltfläche, um den Festpunktmodus freizugeben und die Kneifunktion auszuschalten.





## 1. Montageanleitung

1) Nehmen Sie die abgebildeten Komponenten aus den Zubehör Karton heraus.

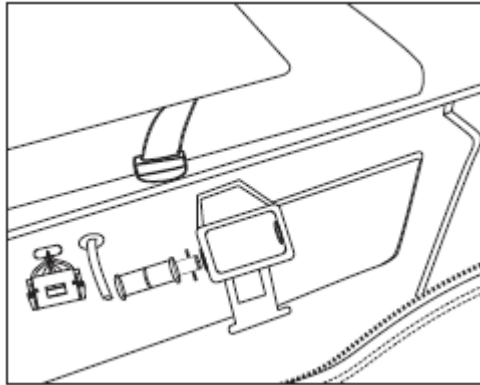


2) Lösen Sie den Sicherungssplint vom Bauteil; Nehmen Sie die einseitige weiße Buchse heraus (bewahren Sie die innere Buchse auf - siehe Abbildung); Richten Sie das Loch des Blechs auf der Rückseite der Sohle mit dem Loch des Eisenrahmens an der Vorderseite des Massagesessels aus (die Platzierung der Auflage und des Massagestuhls sollte so weit wie möglich parallel gehalten werden, dies ist für die spätere Installation praktisch).

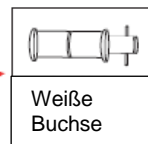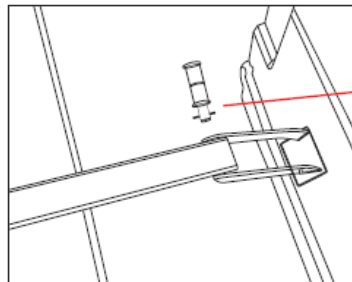


11) Ziehen Sie den Reißverschluss, der den Überzug mit dem Massagesessel verbindet (es gibt 4 Stellen: 1. Wade und Überzug; 2. hinten links; 3. hinten rechts; 4. Kopfteil).

Lösen Sie den Klettverschluss vom Sitz des Massagesessels, bevor Sie den Überzug anbringen.

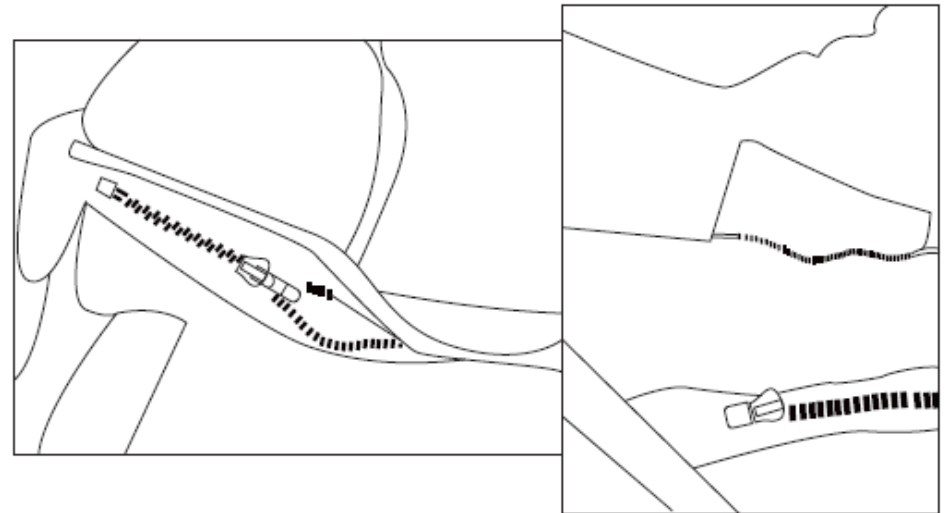


12) Zum Schluss schließen

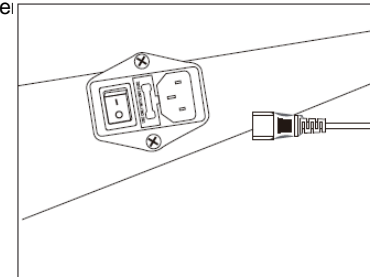




9) Setzen Sie die Leiste in den entsprechenden Schlitz des Massagesessels (das Loch des schwarzen Klemmblocks muss mit dem Loch des Schlitzes übereinstimmen) ein.


Nehmen Sie die Schrauben aus der Zubehörbox und ziehen Sie diese mit einem Werkzeug wie z.B. einem Schraubenzieher fest.

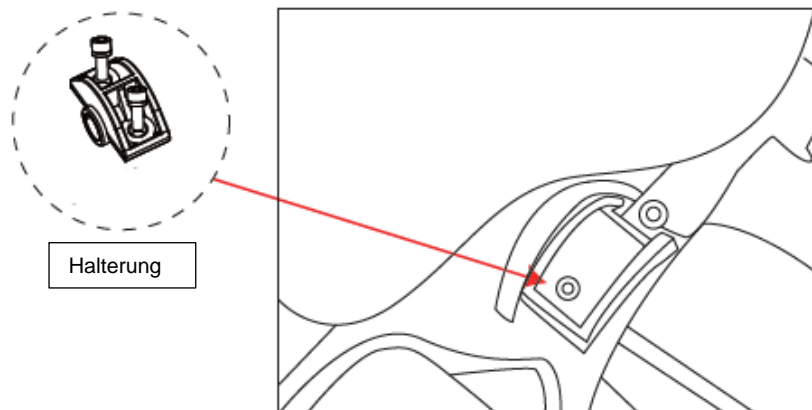


10) Siehe Abbildung: Schrauben Sie die Schraube des D-Bügels auf der Rückseite des Massagesessels ab; Stecken Sie das schwarze Gurtband am oberen Ende des Sessels in den D-Bügel; Ziehen Sie abschließend die entfernten Schrauben fest. (Der D-Schäkel für die Kap-Sitzposition sollte auch an Ort und Stelle installiert werden)

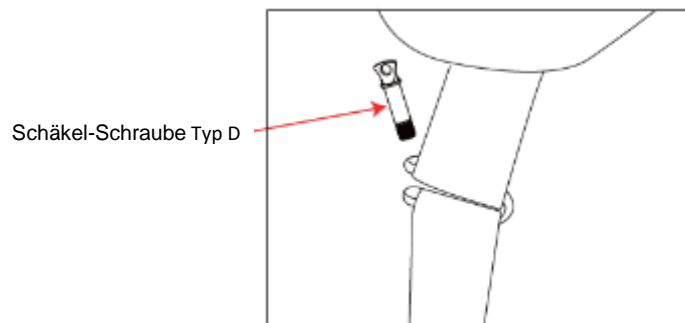


3) Setzen Sie die in Schritt 2 vorbereiteten Bauteile entsprechend der Abbildung ein.

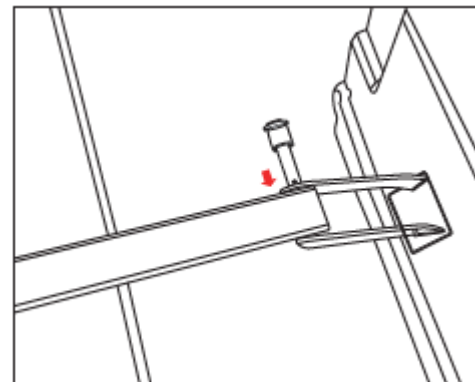

4) Bis die weiße Hülse am Unterschenkelblech anliegt.

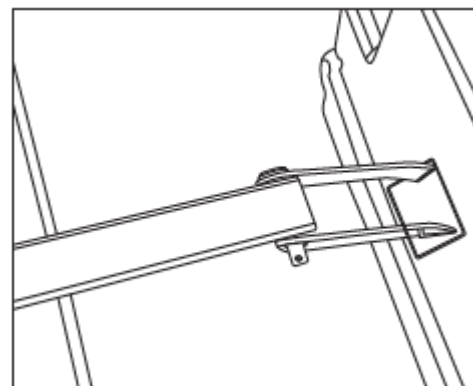


**5)** Setzen Sie die in Schritt 2 entfernte weiße Buchse in das gegenüberliegende Loch ein.

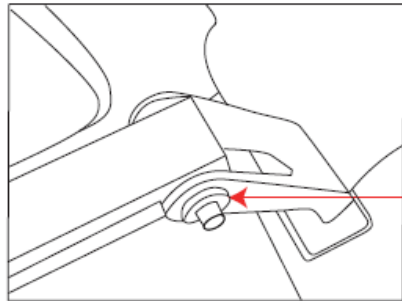


Weiße Buchse

**6)** Siehe Abbildung; Setzen Sie den Sicherungssplint ein.

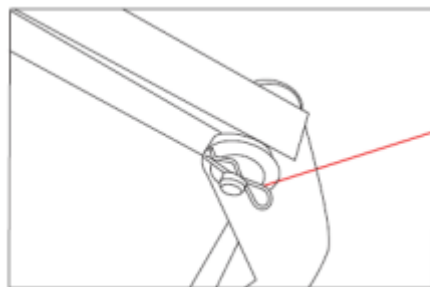


Sicherungssplint

**7)** Schließen Sie die Rohrleitung und den Ablaufstutzen der Wade und des Massagesessels an (die Rohrleitung und der Ablaufstutzen sollten in dem gezeigten Zustand angeschlossen werden; Vermeiden Sie Ausnahmen bei der späteren Verwendung).

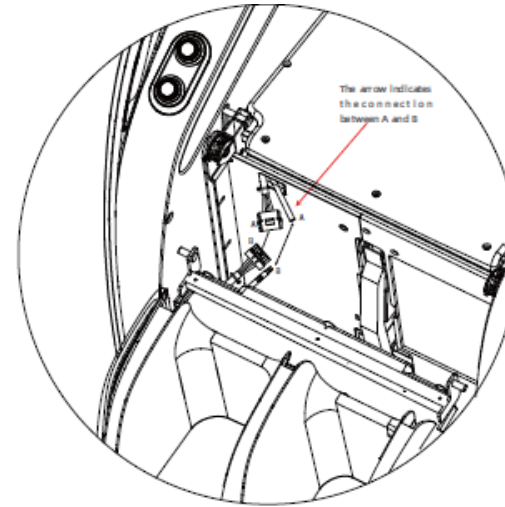

**8)** Entfernen Sie den schwarzen Pressblock aus dem Gehäuse (Handteil abgebildet); Richten Sie den Zylinder an der Oberseite des Unterschenkels aus und setzen Sie (die schwarzen Pressblöcke werden auf beiden Seiten des Unterschenkels benötigt) ein.

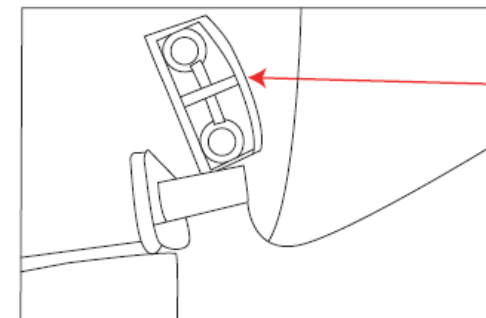

Schwarzer Block